


The RAMP Knee Positioning System™

The RAMP permet de passer sans effort d'une position stable à l'autre et de mouvoir ainsi les jambes des patients sans la moindre contrainte. Son design unique permet à ses utilisateurs de gagner en efficacité opérationnelle, chirurgicale et financière au cours d'une large gamme d'interventions sur le genou.



**Rationalisez vos interventions
sur le genou avec The RAMP !**

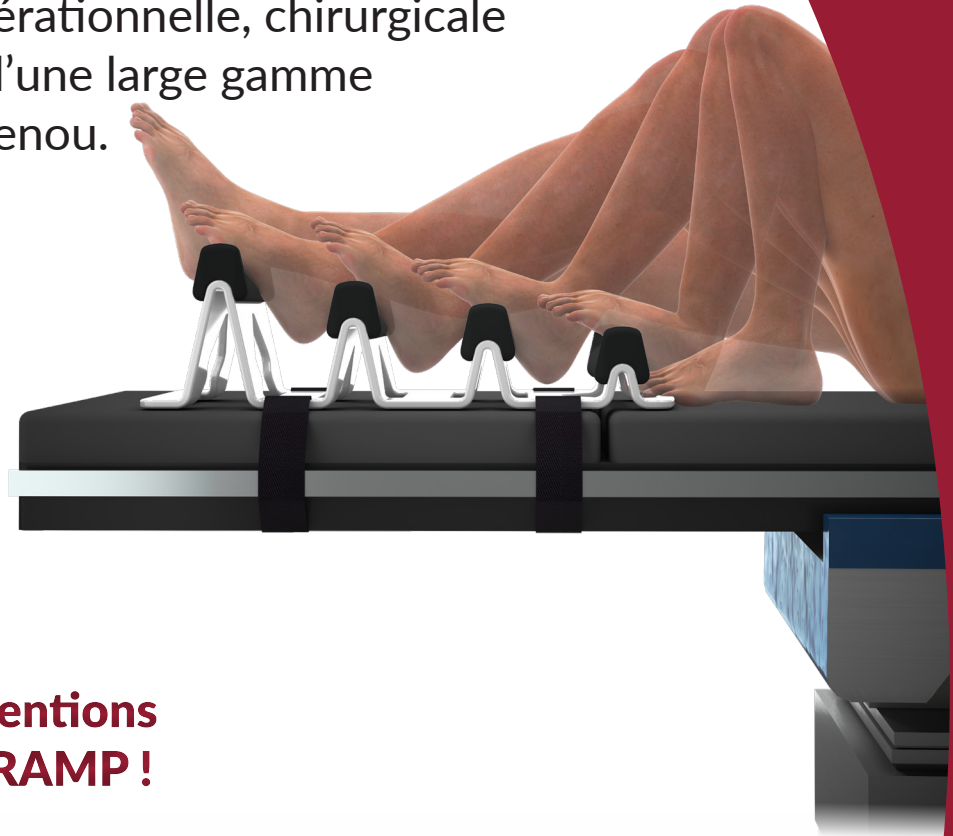

Ramped up Locked down

Extension complète du genou

Du fait de sa surélévation, le repose-pied situé à l'extrémité distale du dispositif permet une extension complète du genou, en particulier chez les patients ayant des cuisses plus larges.

Protection des points de pression

Le côté distal doux et arrondi du repose-pied offre un confort à la région du talon d'Achille, tandis que sa forme ergonomique offre un soutien optimal au mollet.

Montage flexible


Les multiples fentes de montage permettent une fixation adaptable à n'importe quelle table d'opération, tandis que les pieds en caoutchouc assurent une meilleure traction.

Position d'hyperflexion

Pour stabiliser le genou en position d'hyperflexion, il est possible d'enfiler le pied du patient dans une poche située en position 1 de The RAMP.

Bandes Velcro

Les bandes Velcro sont disponibles en deux tailles pour permettre un montage adaptable sur n'importe quelle table d'opération. Les instructions d'installation sont imprimées sur les bandes Velcro pour faciliter l'utilisation.

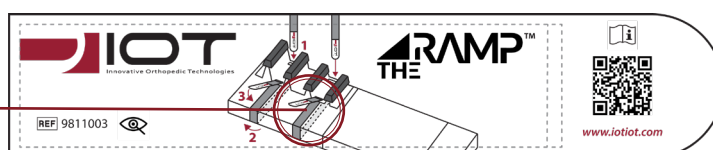

Bords surélevés


Les coussinets sont dotés de bords surélevés, ce qui permet de mieux les localiser à travers le drap d'une part, et d'améliorer la précision et la l'utilisation lors du positionnement d'autre part.


Design à coussinet plat

La surface plate et ferme du coussinet, orientée vers la partie proximale, assure un positionnement stable de la plante du pied.

Adhérence du repose-pieds


Le repose-pieds microstructuré offre une adhérence ferme et une stabilité supérieure.

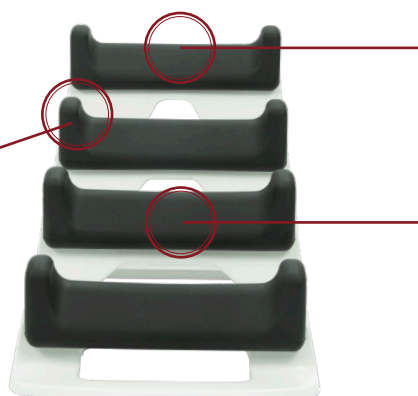

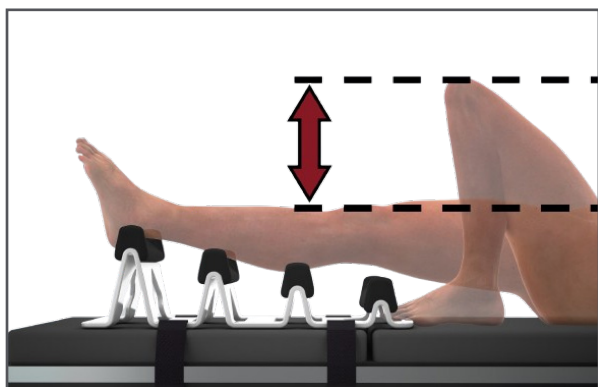

Ergonomie chirurgicale améliorée

La mise en place d'une prothèse totale de genou est réalisée en position de flexion et d'extension. The RAMP permet de surélever le genou en extension complète, réduisant ainsi le changement total de hauteur du champ opératoire pendant l'intervention.

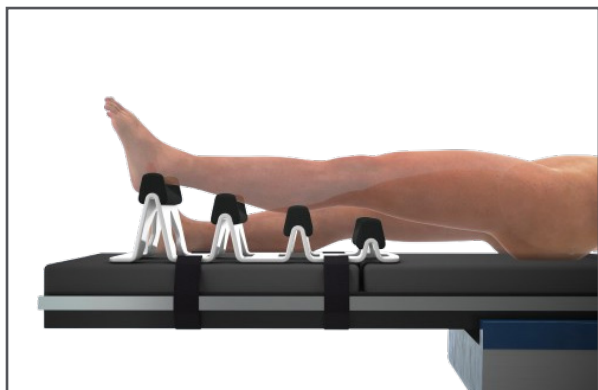


Extension complète avec facilité d'accès

Le design surélevant le pied permet plus facilement l'extension complète du genou, en particulier chez les patients ayant des cuisses plus larges.



Stabilité « mains libres »

L'installation d'un support latéral et d'une cale sous la hanche du patient garantit une stabilité maximale de la jambe dans les six positions et une accessibilité accrue à cette dernière.

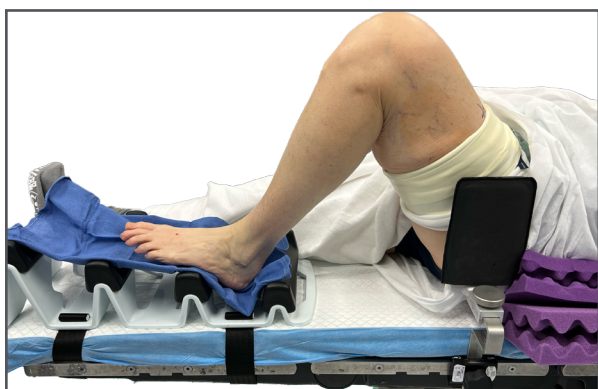


Simple installation

The RAMP se fixe rapidement et facilement à n'importe quelle table d'opération standard à l'aide de deux bandes Velcro, permettant ainsi une mise en place et une rotation rapides.



Guide d'installation

Scannez le code QR pour accéder au guide d'installation de The RAMP.

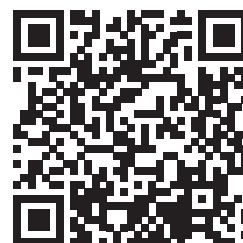

One Device Six Positions

Pourquoi choisir The RAMP ?

The RAMP optimise les interventions sur le genou tout en réduisant le personnel et les ressources.

Cette solution tout-en-un fabriquée en Suisse se fixe facilement à toute table d'opération standard à l'aide de deux bandes Velcro - aucun composant supplémentaire n'est nécessaire.

Sans autoclave ni consommables stériles, The RAMP assure une mise en place et une rotation rapides, ce qui permet de gagner un temps précieux et de respecter le calendrier des interventions, tout en produisant moins de déchets.

CHIRURGICALE OPÉRATIONNELLE

FINANCIÈRE

EFFICACITÉ



Six positions stables
Changement rapide de
position



Aucun démontage, nettoyage et
aucune stérilisation nécessaire
Installation en une seule étape



Moins de personnel nécessaire
Pas de consommables stériles

Passer commande sur info@iotiot.com

IOT (Innovative Orthopedic Technologies) développe des solutions spécifiquement dédiées au marché de l'orthopédie, et notamment des dispositifs de positionnement des patients innovants qui s'intègrent en toute transparence dans l'environnement opératoire. Notre objectif consiste à rationaliser les procédures, à favoriser leur répétabilité et à libérer littéralement les mains des équipes chirurgicales.

Demande de brevet international PCT/EP2024/055273 /
Enregistrement de dessin ou modèle international n° DM/230247
Images non contractuelles. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi :



États-Unis :
Innovative Orthopedic Technologies, LLC
8708 South Congress · Suite A-140 · Austin, TX 78745
t : +1 409-658-1017 · e : info@iotiot.com · w : www.iotiot.com

International :
Innovative Orthopedic Technologies IOT AG
Langäulistrasse 8 · CH-9470 Buchs · Switzerland
t : +41 81 511 9800 · e : info@iotiot.com · w : www.iotiot.com

RAMP IFU_RD-PT-9811000-01fr_V05

RD-PT-9811001-20_V02_Brochure_RAMP_FR

